

MARSDEN

M-550BT

Digitale Flachwaage



Eichklasse III

Präzise auf 200g mit einer Kapazität von 200Kg

Weite Wägeplattform

Bluetooth Modul für telemedizinische Systeme

www.marsdenweighing.de



Marsden M-550BT: Das Upgrade zur kabellosen Datenerfassung für wenig Geld

Marsdens M-550BT - die erschwingliche, hochpräzise Medizinwaage mit einer großen Standfläche und mehreren Funktionen. Sie ist nun als Waage mit Bluetooth Funktion verfügbar. Das bedeutet, dass Sie für kleines Geld eine telemedizinische Lösung erhalten um die Patientendaten kabellos zu erfassen.

Kleiner Preis - bessere Präzision

Neben dem kleinen Preis hat die M-550BT sich in Tests bewiesen. Sie ist bis zu 5 mal präziser als traditionelle mechanische Waagen.

Das deutliche digitale Waagendisplay zeigt das Gewicht des Patienten bis auf 200g genau an (sehen Sie die Spezifikationen auf der nächsten Seite für mehr Details).

Mechanische Waagen sind normalerweise bis auf 1 Kg genau.

Diese Waage ist eine perfekte Ergänzung in jeder Arztpraxis.

Einfache Protokolle für Datentransfer.

Die M-550BT besitzt ein 4.0 Bluetooth Modul (gibt einfache Protokolle an), welches erlaubt das Gewicht, die Größe und den BMI von der Waage an ein anderes Gerät zu senden.

Diese Geräte müssen entsprechend konfiguriert werden um die Informationen zu empfangen. Sobald es einmal eingerichtet ist, wird es Ihnen die Möglichkeit geben die Patienteninformationen aufzunehmen und dabei potentielle menschliche Fehler zu vermeiden.

Daten können normalerweise bis zu 30 Meter weit von der Waage aus gesendet werden. Die Verbindungsgeschwindigkeit beträgt 25mbps.



Eine weitere Trittfläche als unsere normalen Waagen.

Ein Key Feature der M-550BT ist ihre größere Wägefläche.

Mit einer rutschfesten Oberfläche ist diese Waage für die meisten Patienten geeignet. Auch für jene, die unsicher stehen.

Sie besitzt eine Tap-on Funktion, wodurch Sie sich zum einschalten nicht bücken müssen.

Key Features

- Eichklasse III
- Bluetooth Modul
- Netzgerät oder Batterien
- Großes, helles Display
- Weite Wägeplattform
- Tap-on Feature
- BMI
- Hold
- Tara


Sie wechseln zu Telemedizin? Sprechen Sie mit uns

Marsden hat bereits mit telemedizinischen Anbietern und NHS Trusts in GB, aber auch mit Kunden in ganz Europa zusammengearbeitet um kabellose Systeme aufzusetzen.


Wir können Ihnen beim konfigurieren, testen und implementieren helfen. Falls Sie eine individuelle Lösung benötigen, können wir eine solche mit Ihnen entwickeln.

Produktspezifikationen:

- Kapazität: 200Kg
- Teilung: 200g
- Strom: Netzgerät (optionales Extra) oder 4x AA Batterien
- Maße: 347mm x 353mm x 60mm
- Nettogewicht: 4Kg

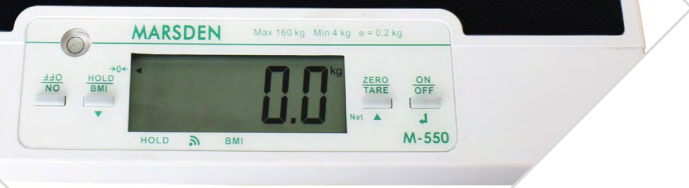

Marsden M-550BT: Key Features auf einen Blick

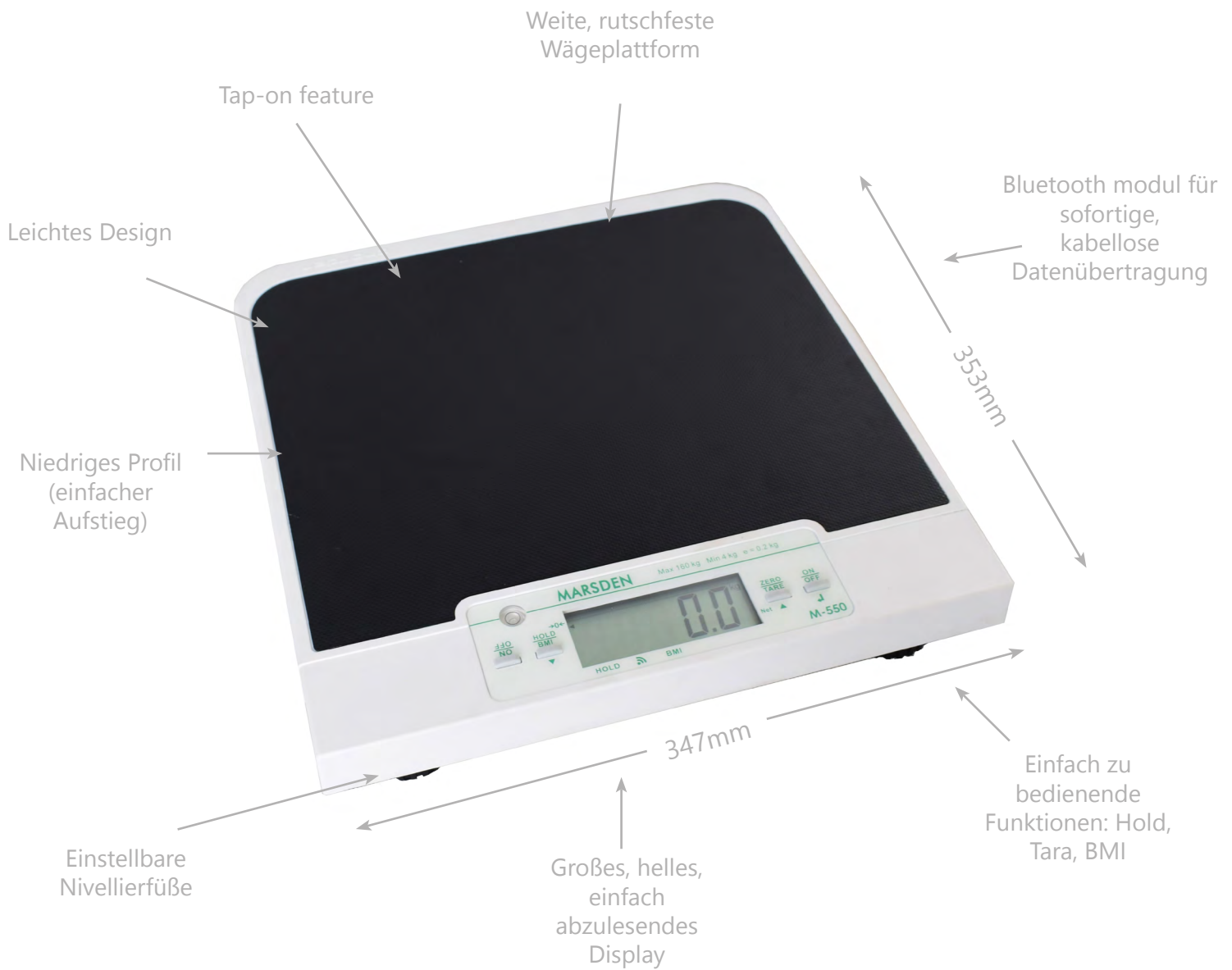

Tel: +44 1709 364296

E-mail: sales@marsdengroup.co.uk

www.marsdenwaagen.de

 MarsdenWeighing

 @MarsdenWeighing

 www.youtube.com/MarsdenWeighing

 <http://pinterest.com/marsdenweighing>

MARSDEN